

NiTiファイル・レシプロケーションシステム

トライアルキャンペーン

キャンペーン期間 2023


3/22 ▶ 5/20

One RECI ワンレシ

根管拡大・形成用

直径1.0mmNiTiワイヤー使用
歯頸部周囲および歯の硬組織の保存

レシプロケーション
熱処理NiTiワイヤー使用

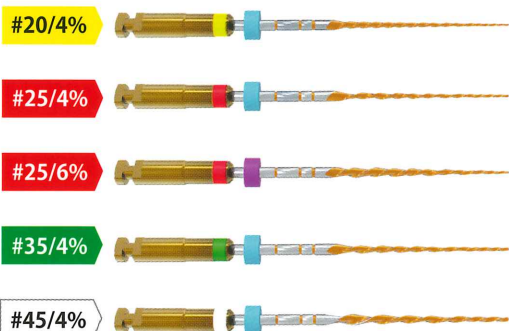

MicroMega FLOW



One Flare ワンフレア

根管口拡大用

柔軟性と破折抵抗の向上

正回転 250-400rpm
トルク 3.0N.cm



T-Wire:
熱処理NiTiワイヤー使用

One G ワンジー

グライドパス用

切削片の掻き上げと穿通効率を向上

正回転 250-400rpm
トルク 1.2N.cm



NiTiワイヤー使用

Remover リムーバー

ガッタパーチャー除去用

従来品より柔軟性と切削除去効率を向上

正回転 400-800rpm
トルク 2.5N.cm



熱処理NiTiワイヤー使用

ORDER INFORMATION

製品名	サイズ	長さ	入数	価格
One RECI	#20/4% (黄)	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	#25/4% (赤)	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	#25/6% (赤)	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	#35/4% (緑)	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	#45/4% (白)	21mm 25mm	5本入り	9,000円
	アソート	21mm 25mm	5本入り	9,000円
One Flare	#25/9%	17mm	5本入り	9,000円
One G	#14/3%	21mm 25mm	5本入り	9,000円
Remover	#30/7%	19mm 23mm	5本入り	7,000円

特別価格でご提供いたします!

販売名: マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (One ReCI)
販売名: マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (One Flare オリフィスオープナー)
販売名: マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (One G グライドパス)
販売名: マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (マイクログリムバー)
電動式歯科用ファイル 管理医療機器 医療機器認証番号: 304AGBZ100001000

ジーシーグループ

[販売元]



株式会社 日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[選任製造販売業者]

コルテンジャパン合同会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1-2F
TEL: 042-595-6945 FAX: 042-595-6946
www.coltene.com

AJMD株式会社
〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町4-7
久松町ロータリービル
TEL: 03-5614-0733 FAX: 03-5614-0734

ご用命は

MicroMega

ROOT CANAL SHAPING
GuttaPercha REMOVAL

保険適用

One RECI

ワン レシ

One Flare

ワン フレア

One G

ワン ジー

Remover




リムーバー



#45/4% #35/4% #25/6% #25/4% #20/4%

安全性を高めた断面形状※とMI-NiTiワイヤーの ワンファイル・レシプロケーションシステム

※JOE Vol48, No.1 Jan2022 "Apical Extruded Debris in Curved Canals"

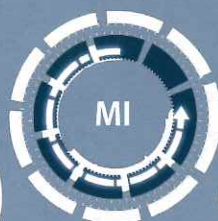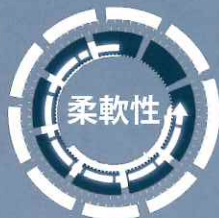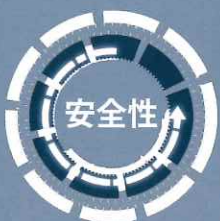

COLTENE

MicroMega Remover

リムーバー

ガッタパーチャー除去

#30/7% (19mm/23mm)



より解剖学的な再根管治療が可能に



ポイント① 従来品GP除去ファイルより柔軟性と切削除去効率を向上させた熱処理NiTiワイヤーを使用

ポイント② マイクロメガ ワンレシと同様、直径1mm MI-NiTiワイヤーを使用

非対称

断面形状
トリプルヘリックス

対称

マイクロメガ リムーバー プロトコル

MicroMega
One Flare

MicroMega
Remover

MicroMega
One Flare

MicroMega
Remover



400 rpm
Max torque 3 N.cm

400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm

400 rpm
Max torque 3 N.cm

400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm

充填材が根尖までである場合

充填材がアンダーの場合

ガッタパーチャー除去後は、マイクロメガ ワンレシで残り3mmのガッタパーチャーを除去し、再度拡大形成を行ってください。

優れたクロス・セクション工程により

切削力と柔軟性を兼ね備えたガッタパーチャー除去ファイルを実現

正回転：400-800 rpm

トルク：2.5 N.cm

単回使用

STERILE EO

滅菌済み



熱処理NiTiワイヤー使用

ORDER INFORMATION

製品名

マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#20/4%	黄	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#25/4%	赤	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#25/6%	赤	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#35/4%	緑	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#45/4%	白	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm	アソート		5本	9,000円
マイクロメガ ワンレシ	25mm	アソート		5本	9,000円
マイクロメガ ワンフレア	17mm	#25/9%		5本	9,000円
マイクロメガ ワンジー	21mm/25mm	#14/3%		各5本	各9,000円
マイクロメガ リムーバー	19mm/23mm	#30/7%		各5本	各7,000円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]

ご用命は



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

選任製造販売業者
AJMD 株式会社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-4-5
真光ビルディング
TEL: 03-5614-0733
FAX: 03-5614-0734

販売名：マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム(One Reci)
販売名：マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (one Flare オフィスオープナー)
販売名：マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (One G グライドパス)
販売名：マイクロメガNiTiロータリーファイルシステム (マイクロメガリムーバー)
医療機器認証番号：304AGBZ100001000

コルテンジャパン合同会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1
TEL: 042-595-6945
FAX: 042-595-6946
www.coltene.com

Follow Us



COLTENE