

シェイク! ミックス ストーン 新規&ご愛用感謝キャンペーン

[キャンペーン期間] 2023 2.21▶3.20 数量限定

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「シェイク!ミックス ストーン 新規&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

「GCI」



Shake! Mix
STONE

シェイク! ミックス ストーン
(ピンクまたはイエロー)
3kg 1函と

キャンペーンセット品

シェイク! ミックス ストーン
専用シェイカー (ピンク) 1個を
組み合わせ価格でご提供!!



1 個

シェイク!
ミックス ストーン
専用シェイカー (ピンク)

包装・希望医院価格●1個=¥800



超速硬石こう(模型用)

シェイク! ミックス ストーン

色調●2色=ピンク、イエロー

包装・希望医院価格●

1函:3kg(1.5kgシンブルバック×2袋)=¥2,980

歯科用硬質石こうシェイク! ミックス ストーン 一般医療機器 13B1X00155000290

ピンクまたはイエロー
1 函

\\ バイブレータ不要! //

20秒シェイクして→流して→5分で完成!



How To Movie
公開中!



裏面もご覧ください!

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間:2023年2月21日~3月20日

貴医院 技工所名
ご住所 〒
TEL ()
お取引販売店

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
シェイク! ミックス ストーン 3kg 1函 [ピンク] (1.5kgシンブルバック×2袋)	シェイク! ミックス ストーン 専用シェイカー (ピンク) 1個	
シェイク! ミックス ストーン 3kg 1函 [イエロー] (1.5kgシンブルバック×2袋)		

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支 店 ●東 京 (03) 3813-5751
●大 阪 (06) 4790-7333
●北海道 (011) 729-2130
営業所 ●東 北 (022) 207-3370
●名古屋 (052) 757-5722
●九 州 (092) 441-1286

ご用命は

真空攪拌器やバイブレーター不要！

気泡が入らない！5分*ではずせる石こう！

1

義歯の即日修理

今日中に義歯を直して渡してあげたい…

2

ホームホワイトニングやナイトガードの即日製作

患者さんに早めにマウスピースをつけてもらいたい…

3

TeCの製作

模型があったら適合の良い技工物ができるのに…

4



デジタル印象の調整用模型

適合・コンタクト調整を事前に…

5

訪問診療

持ち運び時間が長いと寸法変化が心配…

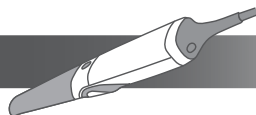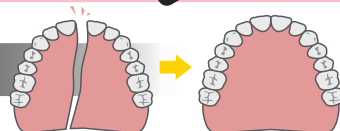

印象採得後から
石こうを注ぐまでの
時間は、模型の
精度に影響します

印象採得直後に
シェイク！ミックスストーンを注入


膨張収縮
なし



+200μm
膨らんでいる
変化なし
縮んでいる
-200μm
(元の大きさに対して)

5時間後に硬石こうを注入
(アルジネートの状態で保管)

収縮

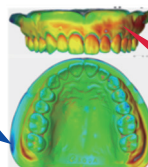

膨張

そんな時は
その場で！

20秒

シェイクして！

流して！

5分待つだけ！

使い方のコツ
動画はコチラ！



GCの

すぐれモノ

臨床に役立つ



「印象採得後、すぐに石こう模型を製作できる」
超速硬石こうシェイク！ミックスストーン
私の使いこなし編

(ばんだ歯科 須崎明先生)




※シェイカーで使用：アルジネート印象の場合 5分 シリコン印象の場合 7分

手練和、真空練和：アルジネート印象の場合 6分 シリコン印象の場合 8分

練和時に入った気泡が消える！

気泡が消えていく理由

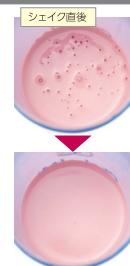


Anti-foaming Technology

特殊成分によって、石こう練和泥の表面張力を低下させて気泡を破裂させます。それにより、シェイク直後には見えている気泡が徐々に消えて無くなります。

【アンチフォーミングテクノロジーの仕組み】

●=特殊成分 ●=気泡 ●=石こう練和泥 ○=気泡の膜

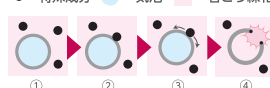

②特殊成分が気泡表面に侵入 ③表面張力が低下していく ④気泡が割れる

さらに、水のように流せて
気泡が消える！



物性比較表

	硬石こう ニューブラ ストーンⅡ	超速硬石こう シェイク！ ミックス ストーン	JIS T6600 タイプ4 (超硬質石こう規格)
初期硬化時間	11分	2分20秒	-
操作余裕時間	8分	2分	-
取り外し時間	40分	5分	-
線硬化膨張 (120分後)	0.25%	0.13%	0~0.15%
圧縮強さ (120分後)	49 MPa	40 MPa	35 MPa以上