

ご注文数		●ステンレススチール				●XP	●XP Pro Thin
ブレードタイプ	ハンドルタイプ	1/4インチ(S)	5/16インチ(L)	3/8インチ(X) イーグルライト	3/8インチ(X) イーグルライト	3/8インチ(X) イーグルライト Pro Thin	
グレイシー キュレット	G1-2						
	G3-4						
	G5-6						
	G7-8						
	G9-10						
	G11-12						
	G13-14						
グレイシー アクセス	GA00-0						
	GA1-2						
	GA3-4						
	GA5-6						
	GA7-8						
	GA11-12						
	GA13-14						
グレイシー ディープ ポケット	G1-2DP						
	G3-4DP						
	G5-6DP						
	G7-8DP						
	G11-12DP						
	G13-14DP						

ご注文数		●ステンレススチール				●XP	●XP Pro Thin
ブレードタイプ	ハンドルタイプ	1/4インチ(S)	5/16インチ(L)	3/8インチ(X) イーグルライト	3/8インチ(X) イーグルライト	3/8インチ(X) イーグルライト Pro Thin	
シックルスケーラー	H5-33						
	H6-7						
	J4-U5						
	M23						
	ブラックジャック						
	204S						
	204SD						

〔対象製品〕いずれか3本

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お取引販売店 _____

関連製品

テストスティック

スケーラーやキュレットの刃部の鋭利さを確認するためのスティックです。

包装・希望医院価格●1本入 ¥680 6本入 ¥3,350

使用方法 インструメントの第一シャックをテストスティックに平行にし余分な力を入れず軽く圧をかけます。この時インスツルメントは引きません。

	第一シャックのエッジがテストスティックに	
	食い込むような引っかかり感がある (鋭なカッピングエッジ)	かみ合わず表面を滑ってしまう (鈍なカッピングエッジ)
ステンレススチール	使用可能	シャープニング
XPシリーズ	使用可能	買換え時期

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

- 支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は

キャンペーン期間 2023. 2.21 ~ 4.20



数量限定

アメリカンイーグル ご愛用感謝キャンペーン

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、「アメリカンイーグル ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

**スケーラー・キュレットの対象製品いずれか3本と
インスツルメント カセット ミントグリーン(5本用)を組み合わせ価格にてご提供!!**

対象製品

- XPシリーズ
- ステンレススチール

いずれか **3** 本

キャンペーンセット品

インスツルメント カセット
ミントグリーン(5本用) **1** 個

【期間限定販売品】希望医院価格 ¥3,500

カセット使用例

※サイズ:約W191×D78×H25mm
※5本用のインスツルメントカセットです。
※使用例写真のインスツルメントは含まれておりません。

XPシリーズをはじめとするハンドインスツルメントは、刃部の損傷、破折を防ぐため、カセットに入れて刃部が当たらないことを確認し、洗浄(超音波・ウォッシャー・ディスインフェクター)、滅菌(オートクレーブ)を行ってください。

3本選ぶのに迷ったら...


全額のSRPに必要な3本セットはこちら!

- グレイシーキュレット G5-6 前歯用
- グレイシーキュレット G11-12 白歯部 近心面
- グレイシーキュレット G13-14 白歯部 遠心面

あると便利な1本はこちら!


- グレイシーアクセス GA00-0 特に狭い部位へのアプローチに最適!!
- シックルスケーラー M23 / M23 XP Pro Thin 1本で全額をチェックできる優れもの

グレイシーキュレット 使用部位

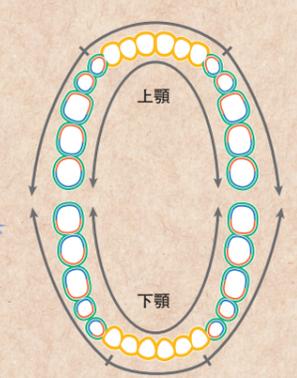

前歯部 00-0 / 1-2 / 3-4 / 5-6
白歯部 7-8 / 9-10
白歯部(近心) 11-12 / 15-16
白歯部(遠心) 13-14 / 17-18

シックルスケーラー 使用部位

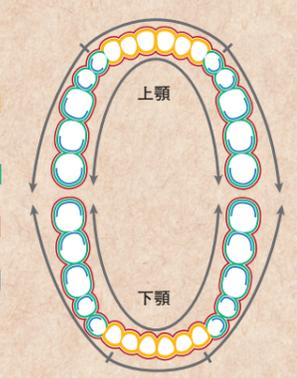

前歯部 H5-33 / H6-7 / J4-U5
白歯部 204S
白歯部(遠心) 204SD
前歯部・白歯部共用 M23 / ブラックジャック

2月21日 発売!!

アメリカンイーグル ファイル ハーシュフェルト

ファイル ハーシュフェルト H3-7
頬舌・唇舌面用



ファイル ハーシュフェルト H5-11
近遠心用



用途
塊となった歯石を砕く
ファイルタイプ

動画で確認!

操作方法

佐藤昌美先生
(池田歯科クリニック 歯科衛生士)




グレイシーキュレット

Gracey Curettes

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP	XP Pro Thin
	1/4インチ(S)	5/16インチ(L)	3/8インチ(X) イーグルライト		
グレイシーキュレット (G)	G1-2 [前歯部]				
	G3-4 [前歯部]				
	G5-6 [前歯部]				
	G7-8 [臼歯部]				
	G9-10 [臼歯部]				
	G11-12 [臼歯部(近心)]				
	G13-14 [臼歯部(遠心)]				
	G15-16 [臼歯部(近心)]				
グレイシーアクセス (GA)	GA00-0 [前歯部]				
	GA1-2 [前歯部]				
	GA3-4 [前歯部]				
	GA5-6 [前歯部]				
	GA7-8 [臼歯部]				
	GA11-12 [臼歯部(近心)]				
グレイシーディープポケット (DP)	G1-2DP [前歯部]				
	G3-4DP [前歯部]				
	G5-6DP [前歯部]				
	G7-8DP [臼歯部]				
	G11-12DP [臼歯部(近心)]				

- 希望医院価格
- ステンレススチール(S) (L) ----- 1本 各¥3,690
 - ステンレススチール(X) イーグルライト ----- 1本 各¥4,250
 - XP (X) イーグルライト ----- 1本 各¥5,900
 - XP Pro Thin (X) イーグルライト ----- 1本 各¥6,500

グレイシーキュレットの形状

スタンダードタイプ



グレイシーキュレット 一般医療機器 13B1X0015500071
XP グレイシーキュレット 一般医療機器 13B1X00155000254

グレイシーアクセスの形状


グレイシーキュレットよりも第一シャンクが3mm長く、ブレード長が半分(深い歯周ポケットや狭い根面・根分岐部に有効)



グレイシーアクセス 一般医療機器 13B1X0015500073
XP, XP Pro Thin グレイシーアクセス 一般医療機器 13B1X00155000255

グレイシーディープポケットの形状

グレイシーキュレットよりも第一シャンクが3mm長い(5mm以上の深い歯周ポケットや根面に有効)

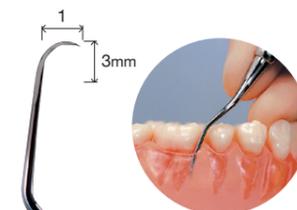

グレイシーディープポケット 一般医療機器 13B1X0015500072
XP グレイシーディープポケット 一般医療機器 13B1X00155000256

シクルスケーラー

Sickle Scalers

ブレードタイプ	ステンレススチール		
	1/4インチ(S)	5/16インチ(L)	3/8インチ(X) イーグルライト
H5-33 [前歯部]			
H6-7 [前歯部]			
J4-U5 [前歯部]			
M23 [前歯部・臼歯部共用]			

ブレードタイプ	XP	XP Pro Thin
	3/8インチ(X) イーグルライト	3/8インチ(X) イーグルライト Pro Thin
H5-33 [前歯部]		
H6-7 [前歯部]		
J4-U5 [前歯部]		
M23 [前歯部・臼歯部共用]		
ブラックジャック [前歯部・臼歯部共用]		
204S [臼歯部]		
204SD [臼歯部(遠心)]		

- 希望医院価格
- ステンレススチール(S) (L) ----- 1本 各¥3,690
 - ステンレススチール(X) イーグルライト ----- 1本 各¥4,250
 - XP (X) イーグルライト ----- 1本 各¥5,900
 - XP Pro Thin (X) イーグルライト ----- 1本 各¥6,500

スケラー 一般医療機器 13B1X00155000070 / XP, XP Pro Thin スケラー 一般医療機器 13B1X00155000263

M23 / M23 XP Pro Thin



M23 XP Pro Thinは、M23よりブレードが細いので特に狭窄した歯間部や歯肉溝などに挿入しやすくなっています。

ホススメ

シャープニングフリーはそのままに、XPよりもさらに細くなった極細ブレードで、歯周ポケットなどへの挿入を负担なくスムーズに行えます。より質の高いSRPやSPT・メンテナンスには、アメリカンイーグルXP Pro Thinがお勧めです。

※M23 XP Pro ThinはM23Tの後継製品です。

ブラックジャック

適度な彎曲と角度があり、叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用可能です。



ブラックジャック XP ブラックジャック XP Pro Thin

204S / 204SD

臼歯部に使いやすい204SDは、204Sより第一シャンクが長いので、臼歯部・遠心にアクセスしやすいシクルスケーラーです。



204S XP 204SD XP

あなたのパートナーに最適な『アメリカンイーグル™』を選びましょう

ブレードの材質 ステンレススチール XP XP Pro Thin

ステンレススチール

鋭い切れ味が持続する“TALON TOUGH”

熱処理とアイステンパリングを施し誕生した、特殊ステンレス合金TALON TOUGH(タロン・タフ)。硬く鋭い鷹の爪の意味を持つこのブレードは、シャープな切れ味が持続し、高いレベルの耐久性と耐蝕性を実現します。


XPシリーズ

XP XP Pro Thin

「XPテクノロジー™」によってより質の高い歯周治療をサポート

独自の技術「XPテクノロジー™」によって誕生したXPシリーズは、ブレードのプラズマフュージョン(特殊加工)によってダイヤモンドのような硬い表面を持ち、ブレードの耐久性をアップ。シャープニング直後のような切れ味が持続できるシャープニングフリーのインストルメントを実現しました。

ブレードの幅 ステンレススチール XP XP Pro Thin

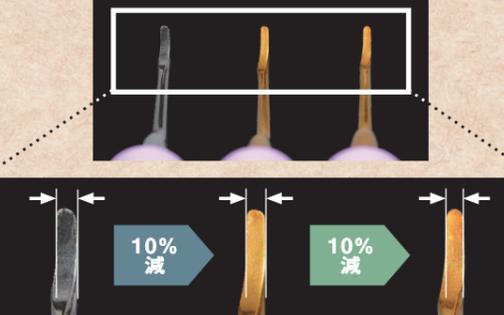

ステンレススチール 硬い歯石や大きな歯石の除去に

XP 超音波スケラーの仕上げやSRPの処置に

XP Pro Thin SPTやメンテナンスの処置に

10% 減 10% 減

ステンレススチール XP XP Pro Thin

ハンドルの種類 S L X X

- S 1/4インチ Sハンドル
- L 5/16インチ Lハンドル
- X 3/8インチ Xハンドル (イーグルライト)
- X 3/8インチ Xハンドル (イーグルライト Pro Thin タイプ)

X X X Xハンドル(イーグルライト)の特長

識別しやすい全7色/



正確に操作できる“SURE GRIP HANDLE”フラットな3本リングとファインカットが施されたハンドルは、水分や血液・だ液が付着したグローブをしていても、滑りにくく繊細な作業を正確に行うのに適しています。

※Xハンドルは形態別に色調が決まっています。