

～ティオンライト発売記念～

ティオン オフィス 新規 & ご愛用感謝 CAMPAIGN

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「～ティオンライト発売記念～ティオン オフィス新規&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。



キャンペーン期間 **2024 2.21 — 3.20** [数量限定]

ティオン オフィス 1 函と

〈キャンペーンセット品〉リップジェル 8.0g 1 個を組み合わせ価格でご提供!



歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス 要冷蔵 医薬用外劇物

- オフィスホワイトニング材 シリンジA 1.0g 1本
- オフィスホワイトニング材 シリンジB 1.0g 1本
- リアクター 2.0g 1本
- 歯肉保護レジン 1.5g 1本
- ディスポーザブルディッシュ 1個
- ディスポーザブルブラシ 2本
- ディスポーザブルファイバー付きチップ 2個

【希望医院価格】 **¥5,800** 高度管理医療機器 歯科用漂白材 22200BZX00785000

1 セット

医療ホワイトニング
ティオンHP



歯科医療従事者様は
こちら



患者様はこちら

医療ホワイトニング

TION

In Office

透明感のある
自然な白さへ。

「V-CAT[®](可視光応答型光触媒)」の応用で、比較的低い過酸化水素濃度で高いホワイトニング効果と低刺激性を両立



ホワイトニング前



ホワイトニング中



ホワイトニング後

◎ キャンペーンセット品


日常使いにもオススメ!

オフィスホワイトニング施術時、染め出し時の**口唇保護**に!

リップジェル 8.0g

【希望医院価格】¥1,050

1 個

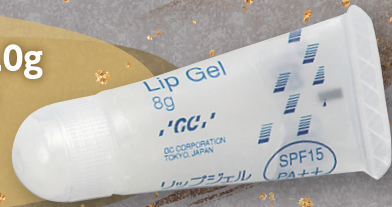

ほんのり甘い香り
パッションフルーツ
フレーバー

UVカット効果
SPF15
PA++

ヒアルロン酸Na
トコフェロール
(ビタミンE) 配合

GCチャンネル
ジーシー 歯科衛生士による
オンラインセミナー

WEBでわかる!

医療ホワイトニングセミナー

●セミナー所要時間: 約30分 <受講料無料>

※動画を視聴できる端末をご用意いただき、必要事項をご入力の上でご視聴ください。
※ご視聴には、歯科医療従事者のための総合情報サイトDentwave.comへの会員登録(無料)が必要です。



裏面に新製品「ティオンライト」の紹介掲載! ぜひ合わせてご検討ください。

2/21
発売!

Check!

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2024年2月21日～3月20日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL (_____) _____

お取引販売店 _____ ご担当者 _____ 様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
ティオン オフィス 1セット	リップジェル 8.0g 1個	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

- 支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
- 営業所 ●北海道 (011) 729-2130
●東北 (022) 207-3370
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

医療ホワイトニング

TiON[®]
In Office

New

ティオンライト



Since 1921
100 years of Quality in Dental

オフィス ホワイトニングの チェアタイムを短縮

ティオンライト
紹介動画はコチラ！




Quick Resin

チェアタイムを短縮する 2つのモード

クイック

Quick モード New

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。

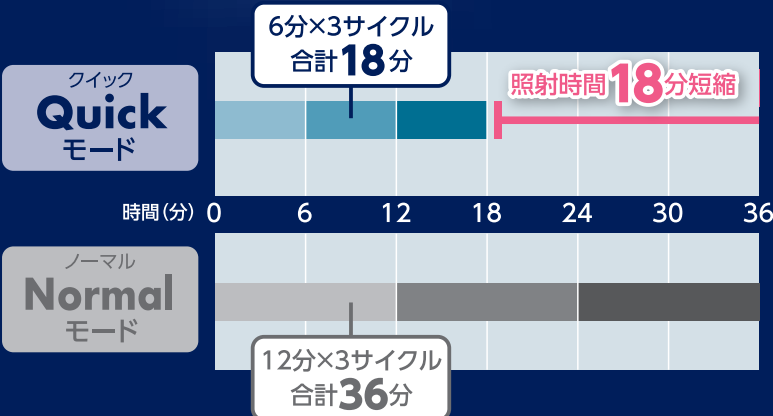

レジン

Resin モード New


コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。



照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	
New レジン Resin	20 秒	歯肉保護レジンの硬化に
New クイック Quick	6 分	短時間でやりたいケースに
ノーマル Normal	12 分	通常モード
ロウ Low	12 分	知覚過敏が心配なケースに

照射光の波長域

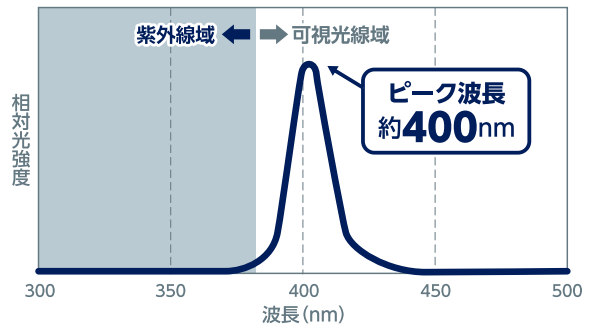

仕様●

電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸法	本体高さ 1550mm ベース部 510mm×430mm
重量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

包装・希望医院価格●

本体1台、マウスガード(ティオンライト用)2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ)2個、六角レンチ(大)(小)各1個、電源コード1本=¥555,000

単品包装

保護メガネ(オーバークラスタイプ) コスモブルー/ティオンライト用
包装・希望医院価格●1個=¥7,000

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312