

ユニバーサルシェード型コンポジットレジン

f・UNO

ア・ウーノ

St タイプに「さらに合う」新色追加!

2024.2.21 水 発売

White / Dark

White

- ホワイトニング歯・乳歯等の明度の高い色調に
- 咬頭頂のキャラクタライズに



窩洞模型 (AO) にWhiteを充填

I級窩洞 (乳歯) White



Dark

- 老年代歯頸部等の濃い色調に
- 象牙質に及び深い窩洞の場合の下地に



窩洞模型 (A4) にDarkを充填

V級窩洞 Dark



I級窩洞 ベーシック + Dark



Darkを象牙質部分に充填し、ベーシックをエナメル質部分に充填

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 D4



シェードフリー

1本で16シェードに対応可能!

「ア・ウーノ」はベーシック1色で幅広いシェードに対応しますが、White、Darkを使用すると、さらに自然な色調の表現が可能になります。

写真提供: 竹内歯科医院 (香川県綾歌郡宇多津町) 竹内一貴氏

発売記念キャンペーン **2024.2.21** 水 - **4.19** 金

期間限定
パック

ホワイト&ダーク

White & Dark お試しパック

- ローフロー (St White、St Dark 各1本)
- フロー (St White、St Dark 各1本)



WhiteとDarkの使用例

		← 明																暗 →	
シェード	ホワイトニング (乳歯含む)	B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4	C4		
I級	White	ベーシック*																	
II級																			
III級																			
IV級																			
V級																		Dark	

*C2～C4において、象牙質に及ぶ深い窩洞の場合は、象牙質部分にDarkを充填することで、より自然な仕上がりになります。




保険適用 ア・ウーノ

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号:304AABZX00013000

色調タイプ		ノーマル		St	
シェード		ベーシック	ベーシック	White	Dark
ペースト 性状	ユニバーサル	●	●	—	—
	ローフロー	●	●	●	●
	フロー	●	●	●	●


ノーマルタイプ

硬化前は歯質よりも透明性が低いため、充填箇所
の視認性が良好です。

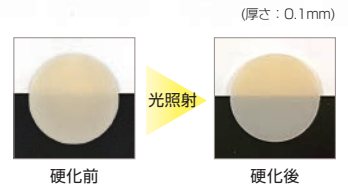

Stタイプ

硬化前後でほとんど透明性が変化せず、充填時に
治療後の色調をイメージ
できます。

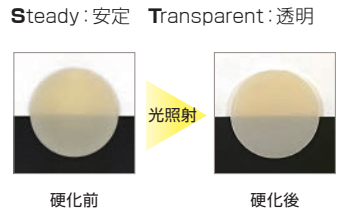

単品包装 ※ローフローおよびフローにはニードルチップ 10本が付属します。



ア・ウーノ ユニバーサル
(ベーシック / St ベーシック)
各 4.0g (2.0mL) 2,900円



ア・ウーノ ローフロー
(ベーシック / St ベーシック / St White / St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円



ア・ウーノ フロー
(ベーシック / St ベーシック / St White / St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

パック

同色3本パック (ベーシック/St ベーシック)
・ユニバーサル 8,250円
・ローフロー 8,250円
・フロー 8,250円

単品

ニードルチップ 20本 600円

詳細は製品特設サイトまで

日本を代表する臨床家による
「ア・ウーノ」症例集

TOKYO SJCD
a·uno The Collection of Works



●資料請求・
サンプル申込みはこちら



製品や機型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格（税抜き）です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3
大 阪 ・ 東 京 ・ 名 古 屋 ・ 福 岡 ・ 仙 台 ・ 高 知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
https://www.yamakin-gold.co.jp

製品に関するお問い合わせ (9:00~17:00)
テクニカルサポート サンキュー ヨクツク
☎ 0120-39-4929

お取扱店