

XP2シリーズ 発売記念キャンペーン

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「アメリカンイーグル XP2シリーズ 発売記念キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

【キャンペーン期間】 2026.2.24 ▶ 4.20 【数量限定】

New

キャンペーン期間中、アメリカンイーグル XP2、
アメリカンイーグル XP2 ProThinを

特別価格


でご提供！
対象製品の詳細は裏面をご覧ください

エクスピーター

XPからXP2への進化 XP2シリーズで治療をもっと軽やかに

XP2はブレードの切れ味・鋭さが向上したことで、試験片の切断に必要な力が約37%低減。(CATRA試験)
切れ味が向上したXP2でのスケリング・ルートプレーニングは、歯石を落とすときの力が低減され、
結果的に術者の疲労・負担や、患者さんの不快感の軽減に繋がると考えられます。

◆ブレードの鋭さに関する比較試験 (n=10)

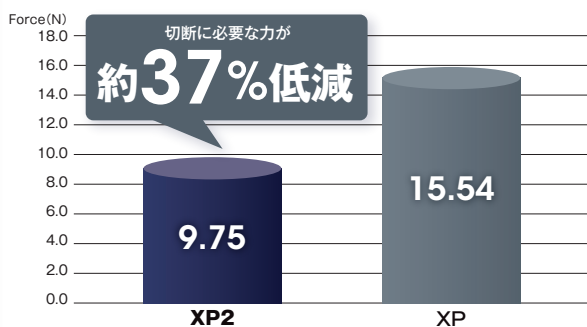

※XP2、XPでの比較試験です。

Cutlery & Allied Trades Research Association試験データ

試験方法: REDS (Razor Edge Durability and Sharpness) 機器を使用し、ブレード先端で
定速 (0.1mm/s) にて試験片を切断したときの力を測定する。



スクエアード テクノロジー

SQUARED Technology

(研磨技術)

&

プラズマフュージョン

(特殊加工)

SQUARED Technologyとプラズマフュージョンにより、
滑らかで 耐久性が高く、
シャープニング直後のような切れ味が持続します。

シャープニングフリーのメリット

1

シャープニングの
時間と労力を低減

2


正しい形状のまま
切れ味よく使用可能

※XP2シリーズはシャープニングを行うことができません。

ブレードの耐久性試験


試験方法: 牛歯のエナメル質に100gの圧をかけて25mm幅でストローク。

ステンレススチールのブレード
1,500回のストローク

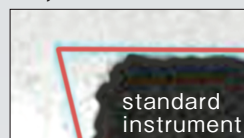

※アメリカンイーグル社データ

XPテクノロジーのブレード
15,000回のストローク

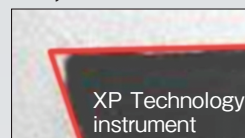

対象製品一覧・ご注文は裏面へ!

グレイシーキュレット

※Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

グレイシーキュレット (G)			グレイシーアクセス (GA)			グレイシーディープポケット (DP)		
ブレードタイプ	XP2		ブレードタイプ	XP2	XP2 ProThin	ブレードタイプ	XP2	
ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト*	ご注文数	ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト*	3/8インチ (X) イーグルライト ProThin*	ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト*	ご注文数
G1-2 [前歯部]			GA00-0 [前歯部]			G1-2DP [前歯部]		
G3-4 [前歯部]			GA1-2 [前歯部]			G3-4DP [前歯部]		
G5-6 [前歯部]			GA3-4 [前歯部]			G5-6DP [前歯部]		
G7-8 [臼歯部]			GA5-6 [前歯部]			G7-8DP [臼歯部]		
G9-10 [臼歯部]			GA7-8 [臼歯部]			G11-12DP [臼歯部 (近心)]		
G11-12 [臼歯部 (近心)]			GA11-12 [臼歯部 (近心)]			G13-14DP [臼歯部 (遠心)]		
G13-14 [臼歯部 (遠心)]			GA13-14 [臼歯部 (遠心)]			G15-16DP [臼歯部 (近心)]		
G15-16 [臼歯部 (近心)]			GA15-16 [臼歯部 (近心)]					
G17-18 [臼歯部 (遠心)]								

希望医院価格 ● XP2 (X) イーグルライト 1本 各¥7,900
● XP2 ProThin (X) イーグルライト 1本 各¥7,900

グレイシーキュレット (G) の形状	グレイシーアクセス (GA) の形状	グレイシーディープポケット (DP) の形状
<p>スタンダードタイプ</p> <p>歯周用キュレット XP2 グレイシー キュレット 一般医療機器 13B1X00155000321</p>	<p>グレイシーキュレットよりも 第一シャングが3mm長く、 ブレード長が半分 (深い歯周ポケットや 狭い根面・根分岐部に有効)</p> <p>歯周用キュレット XP2 グレイシー アクセス 一般医療機器 13B1X00155000319</p>	<p>グレイシーキュレットよりも 第一シャングが3mm長い (5mm以上の深い 歯周ポケットや根面に有効)</p> <p>歯周用キュレット XP2 グレイシー ディープポケット 一般医療機器 13B1X00155000320</p>

シクルスケーラー

※Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

ブレードタイプ	XP2	XP2 ProThin	ブレードタイプ	XP2	XP2 ProThin
ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト*	3/8インチ (X) イーグルライト ProThin*	ハンドルタイプ	3/8インチ (X) イーグルライト*	3/8インチ (X) イーグルライト ProThin*
204S [臼歯部]			J4-U5 [前歯部]		
204SD [臼歯部 (遠心)]			M23 [前歯部・臼歯部共用]		
ブラックジャック [前歯部・臼歯部共用]					
H5-33 [前歯部]					
H6-7 [前歯部]					

希望医院価格 ● XP2 (X) イーグルライト 1本 各¥7,900
● XP2 ProThin (X) イーグルライト 1本 各¥7,900

歯科用スケーラー XP2 スケーラー 一般医療機器 13B1X00155000318

貴医院名

ご住所 〒

TEL ()

お取引販売店 様

ご担当者

関連製品

テストスティック

スケーラーやキュレットの刃部の鋭利さを確認するためのスティックです。
包装・希望医院価格●1本入 ¥720 6本入 ¥3,520

使用方法 インstrumentの第一シャングをテストスティックに平行にし余分な力を
入れず軽く圧をかけます。この時Instrumentは引きません。

第一シャングのエッジがテストスティックに		
	食い込むような引っかかり感がある (鋭利なカッティングエッジ)	かみ合わず表面を滑ってしまふ (鈍なカッティングエッジ)
ステンレススチール	使用可能	シャープニング
XP2シリーズ	使用可能	買換え時期

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。 また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
●北海道 (011) 729-2130
営業所 ●東北 (022) 785-8040
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

ご用命は